

cellec V セレックV

仕様

販売名	セレックV
一般的名称	キセノン光線治療器
フィルター	420(S) / 500(S) / 530(S) / 530(D) / 550(S) / 560 / 590 / 640 / 700
フルエンス	1～60 J/cm ²
パルス幅	1～60 ms
ディレイタイム	1～60 ms
ランプタイプ	キセノン光線
スポットサイズ	40mm×10mm
本体寸法	368(W) × 565(D) × 1030(H)mm ＊アーム部分を除く
本体重量	95kg
定格電源電圧(コンセント)	単相200V (アメリカンプラグL6-30)
医療機器認証番号	231ADBZI00015000
クラス分類	クラスII
管理医療機器	特定保守管理医療機器



Jeisys Medical Japan株式会社

〒141-0031 東京都品川区西五反田5-5-7 ケーエムビル3F TEL:03-5436-7710 / FAX: 03-5436-7720

Website: <https://jnmj-inc.com/> Email: jnmjmk@jnmj-inc.com



cellec v

キセノン光線治療器 「セレックV」

9種類の交換可能なハンドピースフィルター

9つのフィルターを搭載し、的確かつ多彩な治療が可能に。



波長について

デュアルテクノロジーフィルター

短波長帯ではオキシヘモグロビン、
長波長帯ではメトヘモグロビンへの高い吸収性を
活かした治療が可能です*。

* 420S(420-600nm)：ポルフィリンの吸収性
500(S)(500-600nm)・530(S)(530~600nm)・550(S)(550-650nm)：オキシヘモグロビンの吸収性
530(D)(530-650nm/900-1200nm)：オキシヘモグロビンとメトヘモグロビンの吸収性があるダブルデュアルフィルター

よりの確で安全なフィルター

スキンタイプとターゲットとなる病変の深度によって
フィルターを交換することで、
よりの確で安全な治療が可能です。

クーリングシステム

安全で快適

表皮温度を保持する、独自のリアルタイム表皮温度モニターシステム「ATC™テクノロジー*」を搭載。
施術中に肌の温度を0~5℃に維持することで、肌を副作用から守ります。

*ATC = Automatic Temperature Controller


よりパワフルに

パワークーリングシステムによって疼痛を緩和し、
副作用のリスクを減らすことで、
ターゲットに対しより高出力で照射することを
可能にします。




3種の発光方式

マルチパルスモード

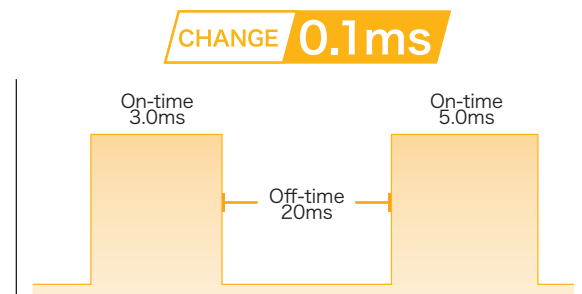


パルス数は、1-3まで選択ができパルスピークタイム
及びパルスバレータイムは、
それぞれ独立して、0.1ms単位で変更することが
できます。

トーニングモード

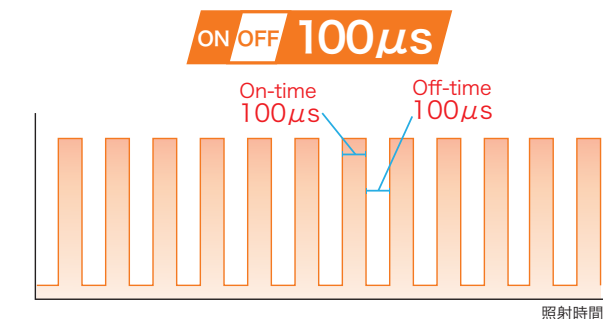

トリガーワンショットで、100μsの光を100μsの
Off-timeと繰り返して照射し、
低刺激の光エネルギーで照射を行うことができます。

フォトシャワーモード

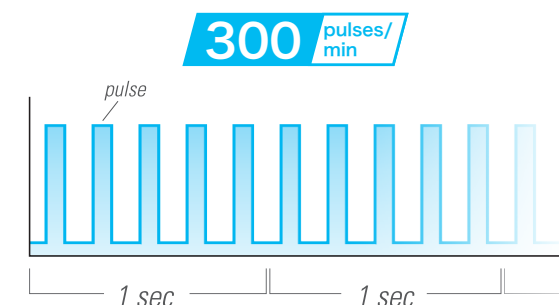

毎秒5Hzまでの光を連続照射することで、温熱効果
が期待できます。

